

Használati útmutató a lézerterápiás készülékhez

Általános leírás: Digitális terápiás készülék otthoni használatra lett kifejlesztve. A készülék három alapfunkciója támogatja a szervezet öngyógyító mechanizmusainak működését.

1. orrüregi soft laser kezelés;
2. masszázis;
3. akupunktúrás kezelés;

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót!

- Óvja a készüléket a párával vagy a tűzzel való érintkezéstől!
- Ne szerelje szét a készüléket!
- Használat után, illetve tisztítás előtt húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból!
- A masszírozó tappancsokat és a levehető műanyag orrillesztéket, ha szükséges szappanos vízzel mossa le!
- Fokozottan figyeljen arra, hogy a lézerkészüléket ne érje víz!
- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja, ahogyan azt az útmutatóban olvasta!
- Ha a készülék vízbe esett, ne érjen hozzá, hanem azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból!
- Ha gyermek vagy mozgássérült személy használja a készüléket, mindig felügyelje, hogy alkalmazása rendeltetésének megfelelő legyen.
- Ha bármilyen kábel megsérült, ha nem működik rendesen, ne használja tovább!
- A termék otthoni használatra készült, nem minősül orvostechnikai eszköznek.
- Ha bármilyen egészségügyi panasz van, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!
- A lézerrel soha ne világítson szembe!
- A készülék használatánál olvassa el a használati tilalmakat!
- A készülék 15 perces kezelésre van beállítva, utána automatikusan kikapcsol.
- Ne használja gyulladt, dagadt, sérült bőrfelületen.
- A készülék használata nem helyettesít semmilyen orvosi kezelést!

Tárolás

Legcélszerűbb, ha a készüléket saját dobozában tárolja, ellenkező esetben biztonságos, száraz helyet válasszon. Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne tegye ki közvetlen erős hőhatásnak. Az csatlakozó vezetékét ne tekerje szorosra, mert ezek könnyen megtörnek és elromlanak!

A doboz tartalma:

- 1db Blueda készülék
- 1db hálózati adapter
- 1db fekete USB – AC vezeték az adapterhez
- 1pár lézer dióda, (orrba dugható) a végén levehető műanyag orrillesztékkel □ 4db masszírozó tappancs
- 2db tappancs tartó műanyag lapocska
- 2db fehér vezeték a masszírozó tappancsokhoz
- 1db használati útmutató könyvecske
- 1db Jótállási jegy (1év)

A készülék 4db AAA elemel is működik, ez nincs a tartozékok között, ezért nem található a dobozban!

Jótállás, garancia

Ne próbálkozzon meg a házilag javítással. A készülék szétszerelése és nem rendeltetészerű használata a garancia elvesztését vonja maga után! Nincsenek a készülékben otthon megjavítható alkatrészek. A készülékre egy év jótállás van, probléma esetén kérjük, forduljon a forgalmazóhoz. Vezetékek meghibásodása (eltörése) nem tartozik a garanciális javítások körébe.

A készülék használata

A készülék otthoni terápiás célra lett kifejlesztve, a használatakor azonban néhány fontos biztonsági előírást be kell tartani! Figyeljen arra, hogy lézerrel a **szemébe ne világítson, mert ez látáskárosodást okozhat!**

Tilos a készülék használata annak, akinek a szervezetébe elektromos készülék van beültetve, mint pl. szívritmus szabályzó! Nem használhatja glaukómás- (zöldhályog), fényallergiás-, vérékenységben szenvedő- és rákos kezelés alatt álló beteg, illetve 14 év alatti gyermek! Ne használja a készüléket terhesség, szoptatás, 38 fok feletti láz, illetve menstruáció alatt sem!

Az **E-Tong HS 2008F** készülék alapsomagjában három terápiás kezelési módra van lehetőség: **1, lézerterápia; 2, masszázs; 3, akupunktúrás kezelés**

1, Lézerterápiás kezelés




Az Blueda lézerterápiás készülék használata nagyon egyszerű: csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez alján lévő aljzatba, majd az orrilleszték jack dugóját dugja be a készülék tetején lévő középső elektroda konnektorba. Az orrilleszték másik végét helyezze be az orrnyílásába, majd kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gomb hosszú lenyomásával. A 15 perces lézerterápiás kezelés elindítása a lézer erősségi fokozatának [1] [2] [3] beállításával indul el. A lézer erősségi fokozatát, szintén a bekapcsoló gombbal lehet aktiválni, ebben az esetben a gombot csak röviden nyomja meg. A fokozat beállításának értéke az LCD kijelző alsó középső részén villogva látható. A kezelési idő az LCD kijelző bal alsó sarkában látható ez 15 percről indul és folyamatosan csökken, ha már nullát mutat, akkor még 60 másodpercig működik, majd automatikusan kikapcsol. Az LCD kijelző a kezelés alatt csak 2 percig világít, – energiatakarékossági okokból -, utána kikapcsol. Az orrilleszték végén lévő műanyag kupak levehető, így használat után könnyen tisztítható szappanos vízzel, vagy fertőtlenítő spray-vel.



2, Masszázs (Tens funkció): Masszázskezeléshez a készlet tartalmaz 4 db mágneses masszírozó tappancsot és 2 db vezeték. A vezeték patentos végét csatkoztassa a tappancsokhoz, a másik jack dugós részét pedig a készülék tetején lévő jobb vagy bal oldali elektróda konnektorba dugja be (figyelem a középső a lézéré). A tappancsokból minimum kettőt, de akár mind a négyet felhelyezheti a masszírozni kívánt testfelületre. A masszírozás elindításához először állítsa be a készüléken a masszázis funkciót. Ezt a program választó "MODE" gomb nyomkodásával tudja megtenni. A készülék alaphelyzetében egy apró kezecskére szimbolizáló villogó jel található az "Acupuncture" felirat mellett. Ezt a jelet kell a MODE gomb nyomkodásával a "Massage" feliratra tovább vinni. A masszázis erősségének beállítását az intenzitás növelés "STRONG" illetve az intenzitás csökkentés "WEAK" gombokkal lehet a legkellemesebb fokozatra állítani. Az intenzitás erősségét az LCD kijelző jobb alsó sarkában lehet látni. A készüléknek mindig azon az oldalán állítsuk az intenzitást, amelyik oldali elektróda konnektorba dugtuk a tappancsot. A kezelési idő itt is 15 perc, ha előbb abba akarja hagyni, akkor egyszerűen kapcsolja ki a készüléket. Használat után a tappancsokat helyezze az egységcsomagban található műanyag tappancstartó két oldalára. A tappancsok elzsírosodás esetén szappanos vízzel lemoshatók.

3, Akupunktúra: Az akupunktúras kezelés, szintén a masszázshoz használt tappancsokkal történik. Mivel a készülék bekapcsolásakor alaphelyzetbe az "Acupuncture" funkcióban van, itt a MODE gombbal nem kell semmit sem kiválasztani. Az akupunktúra erősségét a masszázsnál leírtak szerint kell a "STRONG" és a "WEAK" gombok nyomásával beállítani. A készülékhez adunk egy "Használati útmutató" füzetecskét, amelyben benne vannak az akupunktúras pontok rajzai és többféle betegség kezelésének a leírása.

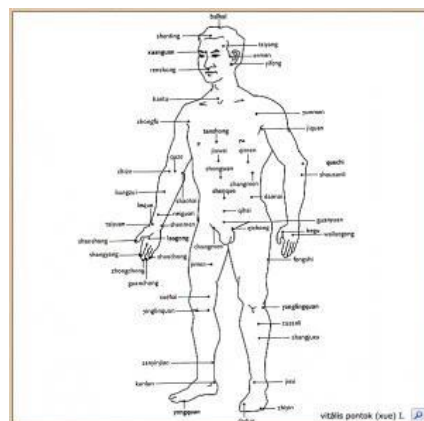

Opcionálisan lehetőség van még az alábbi kiegészítő tartozékok megrendelésére: 1, talpmasszírozó papucs; 2, pulzáló masszázskesztyű; 3, köpölyöző harang; 4, ultrahangos arcmasszírozó; 5, vibrációs arcmasszírozó; 6, forró tapasz; 7, fülmasszírozó.

Műszaki adatok

Minősítések: ISO9001; ROHS; C€

Energia ellátás: AC 220 V/50Hz (adapter) vagy DC 4,5 V (4 db AAA ceruza elem)

Az elem élettartama: 40 óra folyamatos használat mellett, normál üzemmódban

Frekvencia: 1-330 Hz

Fogyasztás: 180 mW ≤

Laser kimenet hullámhossza: 650 nm (nanométer)

Laser kimeneti teljesítmény: 1-5 mW [1] – [2] – [3] fokozat

Környezeti hőmérséklet: -10 ~ ± 40 ° C

Készülék mérete: 153 mm x 70 mm x 18 mm

Súly: 90g (elemek nélkül)

Származási hely: Kína